

HOSPAL Service Report

Service Report N°
IT-TSI-0109-718

Data intervento
26/02/2009

Stato
Completed

Ordine Cliente N.
275309

Intervento eseguito da
SOLAS, VALTER

Cliente

☐ Nuovo cliente

☐ Cambio indirizzo

Ragione Sociale/Dipartimento RIANIMAZIONE C/O OSP. "S. MARTINO"		Codice Cliente IT119061	
Indirizzo VIA ROCKFELLER			
Località ORISTANO	CAP 09170	Provincia OR	Nazione IT
Referente		Telefono	

Prodotto

PRISMA

S/N

PR02621

Identificativo

Versione Software

3.10

Id Prodotto

IT101075PR02621

ContaOre

10088

Condizione riportata / Problema

Pompa arteriosa rumorosa.

Intervento

Sostituito: pompa sangue e pompa effluente, assieme pod di pressione accesso, culatta Pompa sangue, culatta pompa effluente, culatta, pompa reinfusione, gruppo pompa eparina, verifica tensioni alimentatore, calibrato bilance e pressione di accesso, verifica funzionamento con filtro.

Parti utilizzate (se applicabile)

Codice parte	Descrizione	S/N parte	Azione eseguita	Qty	Mag
588001002	ROTOR ASSEMBLY		Proactive Replacement	2	48
588008000	PUMP MOTOR		Proactive Replacement	1	48
588008000	PUMP MOTOR		Replacement due to failure	1	48
588011001	HEPARIN PUMP ASSY. PRISMA		Replacement due to failure	1	48
588060000	PRESSURE POD ASSEMBLY		Proactive Replacement	1	48
588160000	PRISMA PUMP HOUSING		Replacement due to failure	3	48

Varie


Addebiti

Inizio intervento 25/02/2009/17.00.00	Fine intervento 26/02/2009/10.00.00	Order Type ZSF2	Codice attività Y01
Work Center TSI-0109	Km auto / Zona 120	Ore viaggio 2	Ore lavoro 5
Diritto fisso 2	Hotel	Taxi	Trasporto
Park	Noleggio auto	Pedaggi	Altro

Firma del tecnico

SOLAS, VALTER

Per accettazione

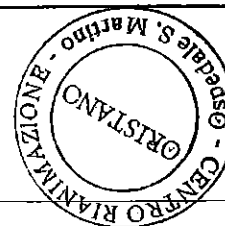

HOSPAL SpA - Via Ferrarese, 219/9 - 40128 BOLOGNA - Italia
Servizio Assistenza Tecnica Clienti Italia: HOSPAL SpA - Via Camurana, 71 - 41036 MEDOLLA (MO) - Italia
Tel. +39 0535 50411 - Fax +39 0535 25960 - e-mail: service.italia@hospal.com
Società Unipersonale appartenente al Gruppo Gambro AB

HOSPAL Service Report

Service Report N°
IT-TSI-0109-702

Data intervento
02/02/2009

Stato
Completed

Ordine Cliente N.
93209

Intervento eseguito da
SOLAS, VALTER

Cliente

☐ Nuovo cliente

☐ Cambio Indirizzo

Ragione Sociale/Dipartimento RIANIMAZIONE C/O OSP. "S. MARTINO"		Codice Cliente IT119061	
Indirizzo VIA ROCKFELLER			
Località ORISTANO	CAP 09170	Provincia OR	Nazione IT
Referente		Telefono	

Prodotto

PRISMA

S/N

PR02621

Identificativo

Versione Software

3.10

Id Prodotto

IT101075PR02621

ContaOre

9791

Condizione riportata / Problema

Si coagula il filtro in assenza di segnalazioni.

Intervento

Sostituito:rotori pompa sangue e pompa dializzato,guarnizioni pod di pressione,pulizia: sede rotori , sede attacchi di pressione,rivelatore aria e rivelatore fughe sangue,spray su contatti connettori alimentazione,verifica tensioni alimentatore,calibrato bilance,eseguito verifiche funzionali con circuito .

Parti utilizzate (se applicabile)

Codice parte	Descrizione	S/N parte	Azione eseguita	Qty	Mag
500365200	LAMP. FRONT PANEL SWITCH		Replacement due to failure	1	48
588001002	ROTOR ASSEMBLY		Replacement due to failure	2	48
6975056	Seals Pressure Pod		Replacement due to failure	4	48
LOC-16424	MANUTENZIONE PREVENTIVA		PM	1	48

Varie

Addebiti

Inizio intervento 02/02/2009/8.30.00	Fine intervento 02/02/2009/11.30.00	Order Type ZSF2	Codice attività Y03
Work Center TSI-0109	Km auto / Zona 120	Ore viaggio 2	Ore lavoro 3
Diritto fisso 1	Hotel	Taxi	Trasporto
Park	Noleggio auto	Pedaggi	Altro

Firma del tecnico

SOLAS, VALTER

Per accettazione



HOSPAL SpA - Via Ferrarese, 219/9 - 40128 BOLOGNA - Italia
Servizio Assistenza Tecnica Clienti Italia: HOSPAL SpA - Via Camurana, 71 - 41036 MEDOLLA (MO) - Italia
Tel. +39 0535 50411 - Fax +39 0535 25960 - e-mail: service.italia@hospal.com
Società Unipersonale appartenente al Gruppo Gambro AB